

Bakteriologisk prøve - MRSA

D07383


Utgave:
4.07

Gjelder fra:
15.04.2026

Side 1 av 2

- Rekvisisjon merkes med: "MRSA-screening-pasient" eller "MRSA-screening-personale".
- Utstyr: eSwab fra Copan og spatel. Se bilde.
- Prøvene sendes til: SI-Lillehammer, Lab. for mikrobiologi, 2629 Lillehammer.

Eswab Amies flytende transportmedium med hvit eller rosa kork

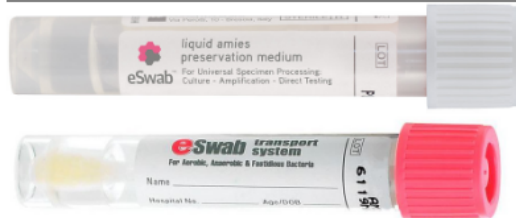

Korkfarge varierer fra leverandør.

Ved stort volum av prøver ved smitteoppsporing eller epidemi: kontakt mikrobiologisk lab. på tlf 61272904 eller 61272905. Unngå å sende prøver på torsdag eller fredag.

Den som tar prøven, bruker hansker, munnbind og smittefrakk.
Prøven tas tidligst 2-3 dager etter at man kan ha vært utsatt for smitte.

PASIENTER

| Risikokategori | Antall prøver | Prøve tas fra |
|----------------|--|--|
| Alle pasienter | 1 prøveglass fra hvert sted (3 prøveglass) | - Ytterst i begge nesebor - Svelg, inklusiv tonsiller - Perineum |
| Eventuelt | 1 prøveglass fra hvert sted | - Sår/eksem/ferske arr (obs. hender, hodebunn, øyelokk, øregang) eller andre defekter i huden - Innstikksteder for fremmedlegemer (dren, trakeostomi, intravaskulære katetre, shunter) - Kateterurin |

PERSONALE

| Risikokategori | Antall prøver | Prøve tas fra |
|----------------|-----------------------------|--|
| Screening | 1 prøveglass fra hvert sted | - Ytterst i begge nesebor - Svelg, inklusiv tonsiller |
| Eventuelt | 1 prøveglass fra hvert sted | - Sår/eksem/arr (obs. andre defekter i huden-hender, hodebunn, øyelokk, øregang) |

Slik skal prøven tas

| | |
|--------------|---|
| Nese: | Prøve tas fra innsiden av begge nesebor (<i>vestibulum nasi</i>). Penselen stikkes ca. 1 cm inn i neseåpningen og roteres 3 ganger rundt hele omkretsen av neseboret. Samme pensel til begge nesebor. |
| Hals: | Gni penselen over begge tonsiller og bakre svelgvegg. |

| | |
|---|---|
| Sår/eksem/arr: | Ved prøve fra sår og lignende vaskes eventuelt synlig puss bort med sterilt saltvann før prøvetaking. Ved prøvetaking fra tørre områder, fuktes penselen med sterilt vann/saltvann før prøvetaking. En pensel til hvert område. |
| Perineum: | Tas fra området foran endetarmsåpningen. |
| Kateter, dren o.a. fremmedlegemer: | Ta prøve fra huden rundt innstikkstedet. |
| Urin: | Ta prøve av urin ved permanent kateter. |
| Begge øreganger (ved symptomer f.ek.s øregang-eksem) | Pensel roteres rundt i ytre del av øregangen. Samme pensel til begge øregangene. |

Referanser[EX.01.02-01](#)[EX.01.02-02](#)[EX.01.02-03](#)[EX.01.07-02](#)[Metodebok](#)[Basale smittevernrutiner](#)[Håndhygiene - hånddesinfeksjon og håndvask](#)[Basale smittevernrutiner - Usterile engangshansker](#)[Kontaktmitte, dråpesmitte, Kohortisolering](#)