

Mikrobiologisk prøve - Fra øvre luftveier ved klinisk mistanke om influensainfeksjon eller andre luftveisinfeksjoner

D31507

Utgave:
3.00

Gjelder fra:
30.06.2024

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

Å sikre korrekt prøvetaking og forsendelse til mikrobiologisk lab

Ansvar/målgruppe

Lege eller sykepleier som tar prøven


Handling

UTM (Universal Transport Medium) brukes for å påvise Adenovirus, CMV, Echovirus type 30, Herpes simplex type 1 + 2, Influenza A, RSV, Varicella-zostervirus, Chlamydia pneumoniae / trachomatis, Mycoplasma hominis / pneumonia, Ureaplasma urealyticum.

Universal Transport Medium (UTM-RT), rød kork brukes til nasofarynks til luftveis-PCR.



eSwab blå kork pakket sterilt med steril pensel til øye, øre, nesegang, nasofarynks og pедиатриске prøver til bakteriologisk dyrkning

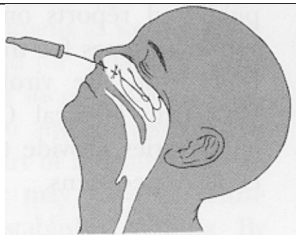

Prøvemateriale kan tas fra:

- nasofarynks og hals (tonsiller)
- nasofaryngeal aspirat
- i verste fall snørr

HUSK: [Aseptisk teknikk!](#)

Slik tas nasofarynksprøve

Beskyttelsesutstyr brukes i forhold til smitterisiko: hansker, sprutsikkert munnbind kl II eller II R, øyebeskyttelse/visir og smittefrakk.

Voksne

- før penselen varsomt horisontalt langs nesegulv i neseboret til man møter motstand, ca. 8 cm
- la penselen ligge i 15 sekunder mens nylonmaterialet suger til seg celler
- plassér penselen i transportmediet og brekk av overflødig skaft.

Små barn

- prøve tas med sugekateter som tømmes/skylles i transportmediet
- avstanden som sugekateteret skal føres inn i nesen, er den samme som fra nesetippen til øreflippen
- klipp eller skjær av ytterste del og sett korken på mediet.

Etter at prøven er tatt

- Optimalt skal prøven analyseres innen 48 timer.
- **Oppbevares i kjøleskap** til den sendes, skal ikke fryses!
- Fyll ut rekvisisjon med kliniske opplysninger og hvordan prøven er tatt, merk prøveglasset.
- Send prøven sammen med kjøleelement (viktig med kjølig forsendelse) som ikke ligger direkte inntil prøveglasset snarest til mikrobiol.avd. som kommunehelsetjenesten har avtale med, evt. til Sykehuset Innlandet, mikrobiologisk avd, 2629 Lillehammer.

Utgave: 3.00	Mikrobiologisk prøve - Fra øvre luftveier ved klinisk mistanke om influensainfeksjon eller andre luftveisinfeksjoner	D31507 Side 2 av 2
-----------------	---	-----------------------

Telefonnummer for å få raskt svar på prøven: Mikrobiol.avd., SI-Lillehammer: tlf 61250200.

Referanser

EX.01.02-01	Basale smittevernrutiner
EX.01.02-02	Håndhygiene - hånddesinfeksjon og håndvask
EX.01.02-03	Basale smittevernrutiner - Usterile engangshansker
EX.01.02-07	Basale smittevernrutiner - Aseptisk (steril) teknikk
EX.01.07-02	Kontaktsmitte, dråpesmitte, Kohortisolering
Metodebok	