



Peritonealdialyse - CAPD med Fresenius-poseskift

D51265

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
08.06.2022

Side 1 av 3

Hensikt og omfang

- Sikre riktig gjennomføring av poseskift med Fresenius sitt PD- utstyr.
- Hindre komplikasjoner og uforutsette hendelser.

Ansvar/målgruppe


- Sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og studenter på sengepost, i sykehjem og i hjemmesykepleie, og pasienter og pårørende som får opplæring i CAPD.

Handling

Utstyr

- Antibac hånddesinfeksjon 75% med glycerol
- Antibac overflatedesinfeksjon 75 %
- Oppvarmet dialysevæske
- Ny desinfeksjonshette
- Eventuelt overgangskobling
- Organisator
- Vekt

Organisator med DISC

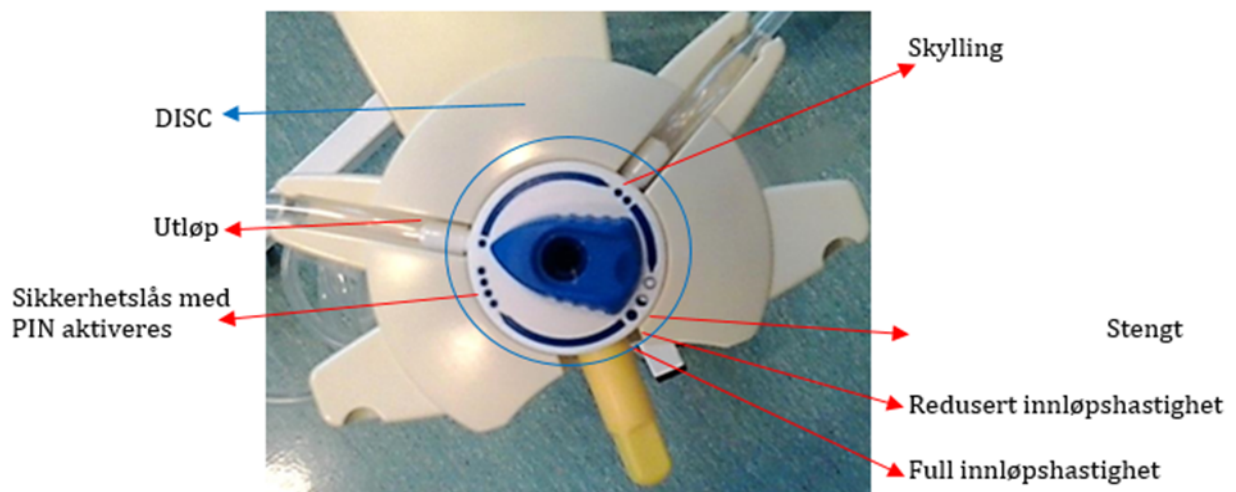

Gjennomføring

- Lukk vinduer og dører, ikke gjør poseskift rett etter at senga er redd opp. Send besøkende ut av rommet under på- og frakobling. Kjæledyr skal ikke være i samme rom. Poseskift skal av hygieniske årsaker ikke gjøres på bad eller kjøkken.
- Vask hendene, følg prosedyre [Håndvask](#).
- Desinfiser bordet som utstyret skal ligge på og tørk av organisatoren med Antibac 75% for overflater og utstyr.
- Ta fram dialyseposen, kontroller holdbarhetsdato, glukosekonsentrasjon og volum. Åpne ytterposen, kontroller at væsken er klar og at posen er hel.

Extraneal- og Nutrinalposer

- Desinfiser hendene, følg prosedyre [Hånddesinfeksjon](#).
- Skru overgangskobling til posen.
- Steng utløpsposen på Extraneal/Nutrinalposen ved å sette på klemme eller knyte en knute på slangen, heng denne opp sammen med dialyseposen.
- Knekk den grønne stiften.
- Følg videre fra punkt under: *Heng opp dialyseposen..

Vanlige poser (Balance)

- Åpne midtsømmen på innerposen ved å rulle posen først fra øvre hjørne til sømmen åpner seg, så fra toppen til den nedre trekanten er helt åpen
- *Heng opp dialyseposen og legg tømmeposen på gulvet. Plasser DISC (posens koblingsdel) i organisatoren.
- Plasser desinfeksjonshetta til venstre i organisatoren (høyre side for venstrehendte).
- Finn frem pasientslangen og tørk av med Antibac 75% for overflater og utstyr, fra enden til og med klemmen, og plasser det til høyre i organisatoren (venstre for venstrehendte).
- Kontroller at den hvite klemmen på pasientslangen er stengt.
- Desinfiser hendene.
- Skru beskyttelseshetta fra DISC.
- Skru pasientslangen ut fra organisatoren (desinfeksjonshetta sitter igjen). Koble den til DISC (i midten).
- Skru beskyttelseshetta på den brukte desinfeksjonshetta. Trekk den ut og kast den.
- Åpne klemmen på pasientslangen og magen tømmes. DISC'en står i posisjon med en prikk.
- Når tømning er ferdig; steng hvit klemme på pasientslangen. Vei posen og før resultatet på væskeskjema (for sykehus MetaVision).
- Dersom hele posen skal settes inn; vri bryter på DISC til posisjon med to prikker. Skylling starter, skyll til all luft er fjernet fra slangesettet.
- Dersom du skal sette inn deler av posen med dialysevæske, heng dialyseposen på vekt. Vri bryteren til posisjon med to prikker, la overflødig dialysevæske renne ned i tømmeposen til det blir riktig mengde igjen i dialyseposen.
- Vri bryter til posisjon med 3 prikker (full utløpshastighet) og la dialysevæsken renne inn til posen er tom.
- Vri bryteren til posisjon med 4 prikker, sikkerhetslås med pin aktiveres.
- Steng den hvite klemma på pasientslangen.
- Desinfiser hendene.
- Skru beskyttelseshetta av den nye desinfeksjonshetta
- Skru pasientslangen fra DISC (blå pin ses i kateteret) og over på den nye desinfeksjonshetta til venstre i organisatoren. Vær sikker på at den er ordentlig skrudd på før pasientslangen med ny desinfeksjonshette trekkes ut av organisatoren.
- Skru beskyttelseshetta på den brukte dialyseposen for å unngå søl.
- Ta DISC og poseslanger ut av organisatoren.
- Observer dialysevæsken: Blakket? Firbrintråder?
- Legg ny pose på varmeplata. Sørg for at slangene ligger opp.

Referanser

Utgave: 1.00	Peritonealdialyse - CAPD med Fresenius-poseskift	D51265 Side 3 av 3
-----------------	---	-----------------------

[SI/17.34-01](#)

[Hånddesinfeksjon](#)

[SI/17.34-02](#)

[Håndvask](#)

[SI/22.02-01](#)

[Basale smittevernrutiner](#)

OUS eHåndbok. Peritonealdialyse. [Internett]. [Hentet 08.06.2022]. Tilgjengelig fra: <https://ehandboken.ous-hf.no/folder/422>

Fresenius Medical Care. CAPD. [Internett]. [Hentet 08.06.2022]. Tilgjengelig fra: <https://www.freseniusmedicalcare.com/en/healthcare-professionals/healthcare-professionals-overview>